


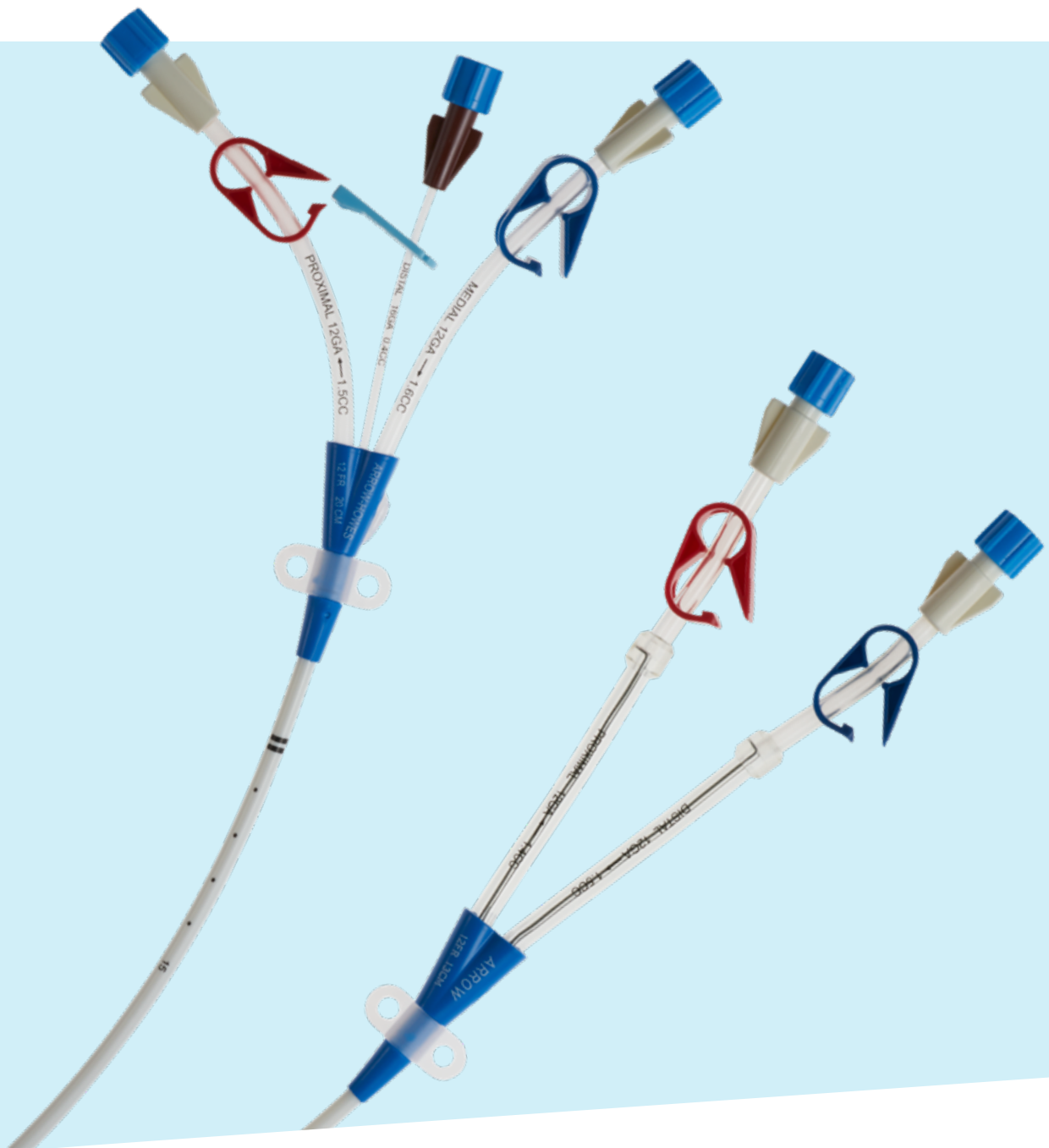

Arrow Blood Access Catheter Set

アローブラッドアクセスカテーテルセット

多彩な用途、 第三のルーメン



トリプルルーメン

第三のルーメン (16Ga.) により、薬剤追加の為に新たにカテーテルを挿入する必要がありません。
また、このルーメンを介してガイドワイヤを挿入することができるのでカテーテルの交換が容易です。
多臓器不全症例等における複数の点滴ライン確保に有用です。

ハイフロー

最大400 ml/min. の血流量を確保できます¹。

断面図

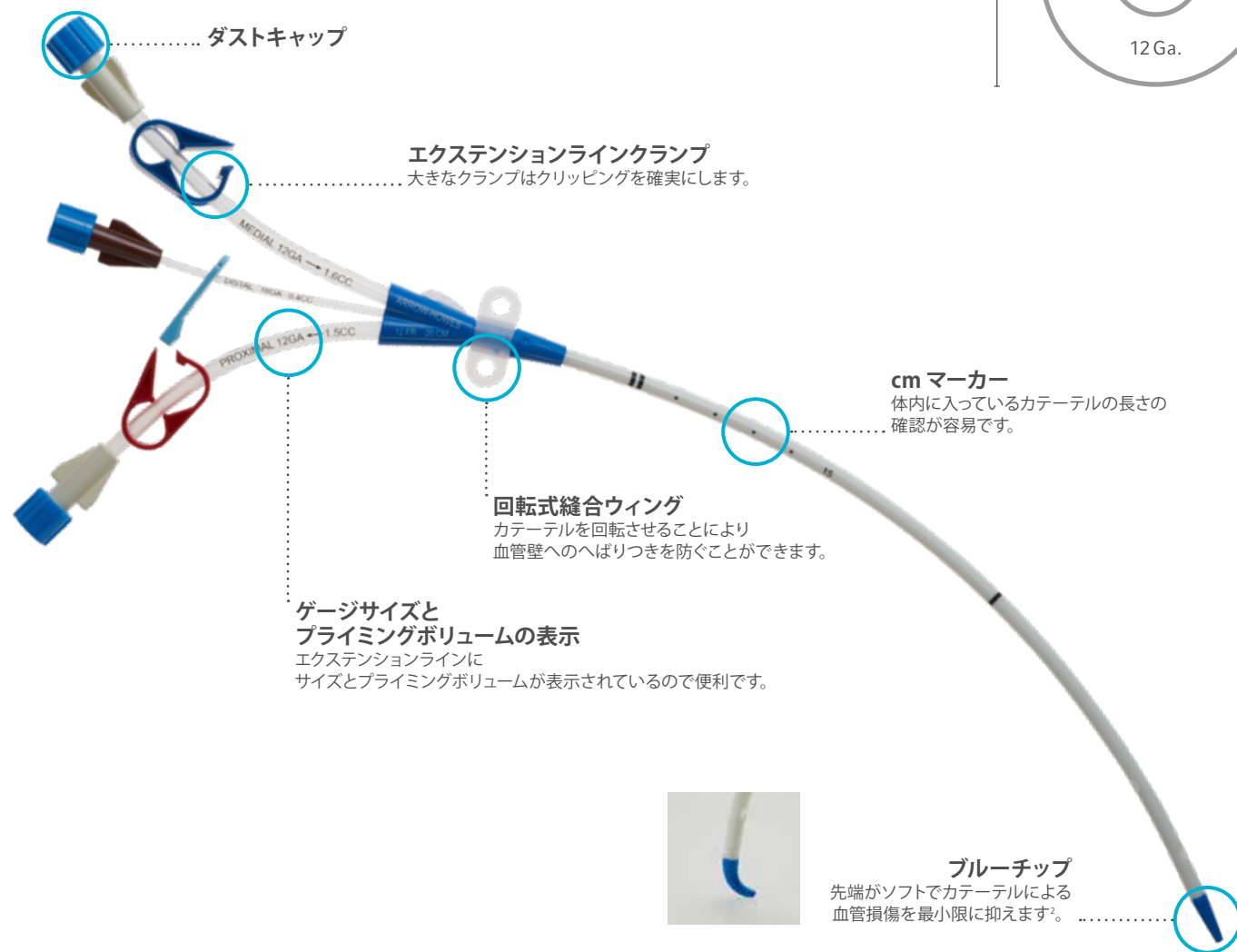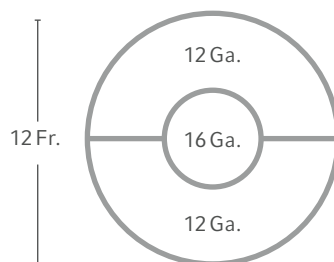


セーフティーシリンジによる安全な挿入


セーフティーシリンジを介してガイドワイヤを直接血管内に挿入することができる為、感染や空気塞栓症のリスクを軽減することができます。



セーフティーシリンジ

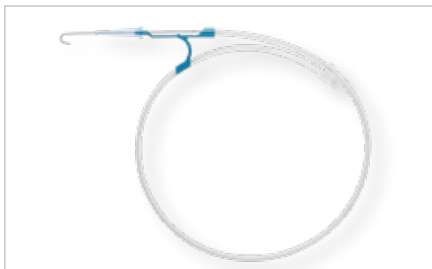

ガイドワイヤ

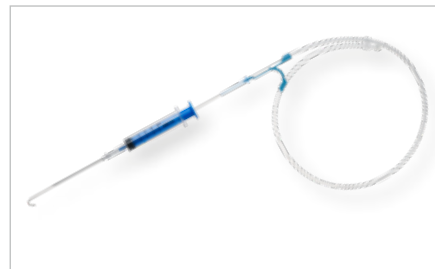

セーフティーシリンジにガイドワイヤを挿入した状態

アローブラッドアクセスカテーテルの特長


- ・ポリウレタン製
- ・先端のブルーチップにより血管損傷を軽減²
- ・回転式縫合ウィング採用



ダブルルーメンカテーテル

ユーベントモデル


エクステンションラインが自由に曲がるユニークなデザイン。必要に応じて任意の形状に調整が可能です。

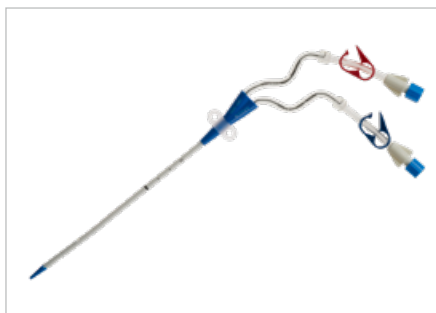

ユーベントモデル (CUタイプ)

² Rosenbauer KA, Herzer JA. Surface morphology and tensile force at breaking point of different kinds of intravenous catheters before and after usage. Scan Electron Microsc. 1981;(Pt 3):125-30.

アローのフルキットタイプは カテーテル挿入に必要な消耗品が全て入っています。

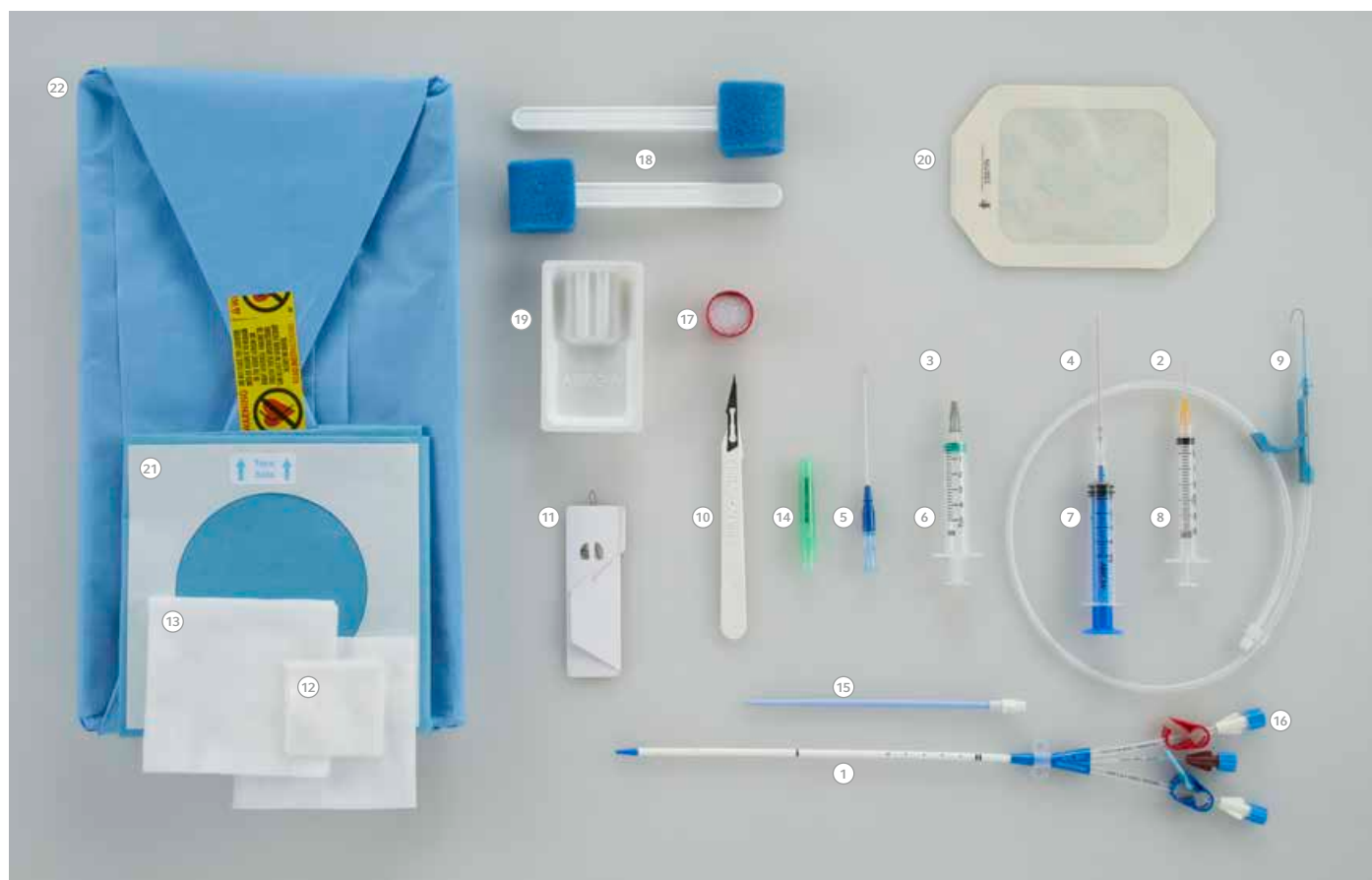

1. 緊急時ブラッドアクセスカテーテル
2. 注射針 25 Ga. x 2.54 cm
3. 注射針 22 Ga. x 3.81 cm
4. 穿刺針 18 Ga. x 6.35 cm
5. カニューラ 18 Ga. x 6.35 cm
6. シリンジ (5 ml)
7. セーフティーシリンジ (5 ml)

8. シリンジ (3 ml)
9. ガイドワイヤ
10. メス
11. 針付縫合糸
12. ガーゼ (小)
13. ガーゼ (大)
14. 圧測定用プローブ
15. ダイレータ (ステップ式)

16. ダストキャップ
17. シャープスアウェイカップ
18. スポンジスワブ
19. スワブ用トレイ
20. ドレッシング
21. 穴あきドレープ
22. CSRラップ

アローブラッドアクセスカテーテルセット フルキットタイプ³

ルーメン数	ダブル		トリプル
製品番号	AK-15122-J	AK-15122-JF	AK-15123-JF
カテーテルサイズ 外径 (Fr.) × 長さ (cm)	12×20	12×20	12×20
ルーメン内径 (Ga.)	12×12	12×12	12×12×16
ガイドワイヤ 直径 (インチ) × 長さ (cm)	0.035×68	0.035×68	0.035×68
注射針 外径 (Ga.) × 長さ (cm)	25×2.54	25×2.54	25×2.54
注射針 外径 (Ga.) × 長さ (cm)	22×3.81	22×3.81	22×3.81
穿刺針 外径 (Ga.) × 長さ (cm)	18×6.35	18×6.35	18×6.35
カニューラ 外径 (Ga.) × 長さ (cm)	18×6.35	18×6.35	18×6.35
カニューラ針 (Ga.)	20	20	20
ダイレータ	1	1	1
シリンジ (3 ml)	1	1	1
シリンジ (5 ml)	1	1	1
セーフティーシリンジ (5 ml)	1	1	1
圧測定用プローブ	1	1	1
穴あきドレープ	1	1	1
ガーゼ (大)	5	5	5
ガーゼ (小)	2	2	2
メス	1	1	1
針付縫合糸	1	1	1
スポンジスワブ	2	2	2
スワブ用トレイ	1	1	1
ダストキャップ	2	2	3
シャープスアウエイキャップ	1	1	1
CSRラップ	1	1	1
ドレッシング	1	1	1

アローブラッドアクセスカテーテルセット 簡易キットタイプ³

ルーメン数	ダブル					トリプル		
製品番号	CS-12122-E	CS-12122-F	CU-13122-F [*]	CS-15122-E	CS-15122-F	CS-12123-F	CS-15123-F	CS-16123-F
カテーテルサイズ 外径 (Fr.) × 長さ (cm)	12×16	12×16	12×13	12×20	12×20	12×16	12×20	12×25
ルーメン内径 (Ga.)	12×12	12×12	12×12	12×12	12×12	12×12×16	12×12×16	12×12×16
ガイドワイヤ 直径 (インチ) × 長さ (cm)	0.035×60	0.035×60	0.035×60	0.035×68	0.035×68	0.035×60	0.035×68	0.035×68
穿刺針 外径 (Ga.) × 長さ (cm)	18×6.35	18×6.35	18×6.35	18×6.35	18×6.35	18×6.35	18×6.35	18×6.35
カニューラ 外径 (Ga.) × 長さ (cm)	18×6.35	18×6.35	18×6.35	18×6.35	18×6.35	18×6.35	18×6.35	18×6.35
カニューラ針 (Ga.)	20	20	20	20	20	20	20	20
ダイレータ	1	1	1	1	1	1	1	1
シリンジ (3 ml)	－	－	－	－	－	－	－	－
セーフティーシリンジ (5 ml)	1	1	1	1	1	1	1	1
圧測定用プローブ	1	1	1	1	1	1	1	1
穴なしドレープ	1	1	1	1	1	1	1	1
メス	1	1	1	1	1	1	1	1
ダストキャップ	2	2	2	2	2	3	3	3

* ユーベントモデル

ここに掲載した製品の仕様および外観は、改良等で予告なしに変更することがあります。製品をご使用になる前に添付文書をよくお読み下さい。
本品は単回使用です。

3 承認番号: 20700BZY01097000, 販売名: アロー ブラッドアクセスカテーテルセット, JMDN コード: 70320100, クラス分類: III
特定保険医療材料名: 042 緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル, (2) ダブルルーメン以上, ① 一般型

テレフレックスは、医療技術の提供を通して人々の健康と生活の質の向上を目指すグローバル企業です。当社は、患者様と医療機関のお役に立てるよう、満たされていない臨床ニーズを絶え間なく追求するという使命のもと、イノベーションを続けています。当社の製品ラインは血管アクセスやインターベンションアクセス、外科手術、麻酔、心疾患治療、泌尿器治療、救急医療、呼吸管理ケアの分野のソリューションを網羅しています。世界中で働くテレフレックスの社員は、自身の日々の業務が世界に変化をもたらすという理解の下、一致団結しています。詳細は、teleflex.com をご覧ください。

テレフレックスは、Arrow, Deknatel, LMA, Pilling, QuikClot, Rüsch, UroLift, および Weck といった共通の目的で結ばれている信頼できるブランドを展開しています。

Corporate Office

電話: +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, USA

Regional Offices

米国: Phone +1 919 544 8000, Toll Free 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

International: 電話 +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Ireland

オーストラリア 1300 360 226

オーストリア +43 (0)1 402 47 72

ベルギー +32 (0)2 333 24 60

カナダ +1 (0)800 387 9699

中国（上海） +86 (0)21 6060 7000

中国（北京） +86 (0)10 6418 5699

チェコ共和国 +420 (0)495 759 111

フランス +33 (0)5 62 18 79 40

ドイツ +49 (0)7151 691 3004

ギリシャ +30 210 67 77 717

インド +91 (0)80 4093 4790

イタリア +39 0362 58911

日本 +81 (0)3 6632 3600

韓国 +82 2 536 7550

メキシコ +52 55 5002 3500

オランダ +31 (0)88 00 215 00

ニュージーランド 0800 601 100

ポーランド +48 22 4624032

ポルトガル +351 225 491 051

シンガポール（SEA直販国以外の国） +65 6439 3000

スロバキア共和国 +421 (0)3377 254 28

南アフリカ +27 (0)11 807 4887

スペイン +34 91 198 84 31

スイス +41 (0)31 818 40 90

英国 +44 (0)1494 53 27 61

詳細は、teleflex.com をご覧ください。

日本:

製造販売業者: テレフレックスメディカルジャパン株式会社

所在地: 〒163-0805 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル

カスタマーサービス: 0570-055-160 • Eメール: infojapan@teleflex.com

www.teleflex.com

テレフレックス、テレフレックスのロゴ、Arrow、Arrow Advancer、Cath-Gard、Deknatel、LMA、Pilling、QuickFlash、QuikClot、Rüsch、Weckは、米国またその他の国々におけるテレフレックス社またはその関連会社の商標、もしくは登録商標です。本資料の情報は、製品の取扱説明書に代わるものではありません。一部の製品は特定の国において利用できない場合があります。お住まいの地域の代理店にお問い合わせください。改訂日:2024年01月
© 2024 Teleflex Incorporated.無断複写・転載を禁じます。